



# 微細手術用替刃メスの主な特長




## K-5100 & K-5110

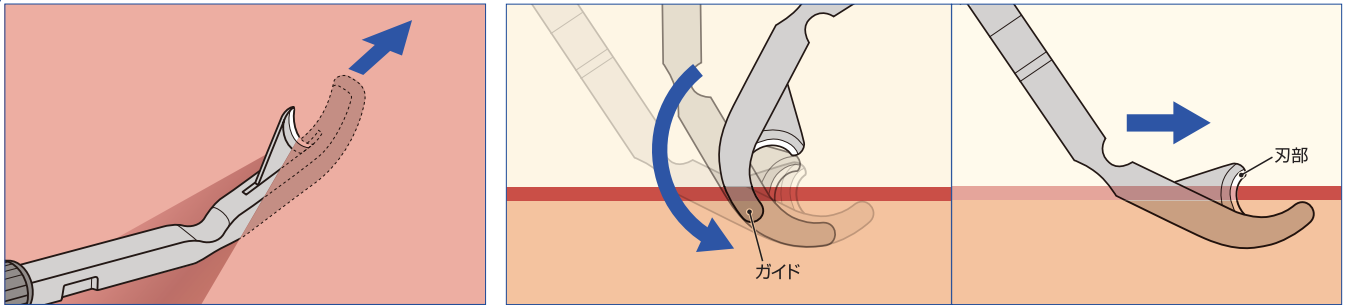


ガイド部と刃部で構成されたK-5100とK-5110は小さな切り口にガイド部を差し込み、押し切る様に使用します。

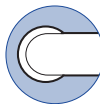


## K-5200 & K-5210

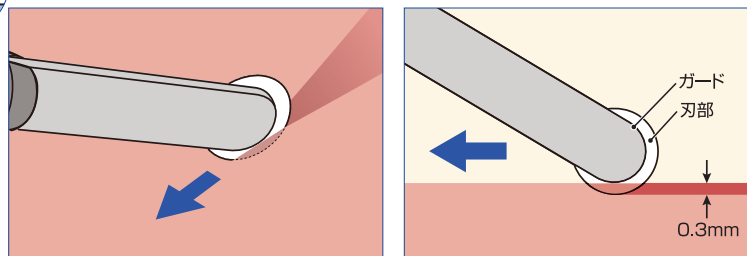

円状メスK-5200,K-5210は軽く押しあてながら切ることができます。  
刃が深く入りすぎないガード付きです。(強く押しあてると必要以上に刃が深く入りますのでご注意ください。)

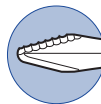

## K-5610

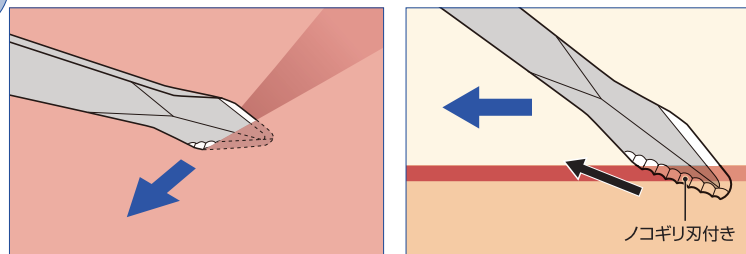

K-5610は矢じり型のメスの片側にノコギリ状の刃が付いています。

●このイラストの製品(K-5100 / K-5110 / K-5200 / K-5210 / K-5610)は当社のオリジナル形状です。