




# フェザー®耳鼻咽喉用替刃メス 鼻用粘膜刀替刃〈K-28B〉

新製品

## 従来のメスでは難しい 鼻腔内側面の切開が行えます。

フェザー鼻用粘膜刀替刃〈K-28B〉は、鎗状のメスを90°に曲げ加工しているため、鼻腔内側面の切開などに有効です。コンパクトな形状は、近年増加している内視鏡下副鼻腔手術(ESS)時に、高い操作性を発揮します。


### 鼻腔内側面の切開

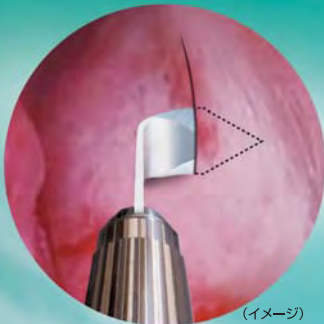


刃先拡大図



片面刃付

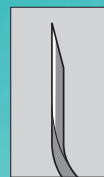

曲げ角度90°

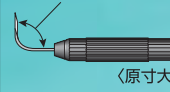

- 替刃式のため、常に一定の切味で使用できます。
- 手術部位に適したチタン合金製ハンドルと組み合わせることが可能です。
- ガンマ線滅菌済

### 〈使用例〉

内視鏡下鼻副鼻腔手術(ESS)において、特に上顎洞開放を行う際、鼻中隔矯正術時の粘膜切開に有効です。



〈フェザー耳鼻咽喉用替刃メス〉 製造販売認証番号 219AABZX00269000 / 管理医療機器

品名	品番	刃幅	刃厚	全長	入数	JANコードナンバー
フェザー鼻用粘膜刀替刃	K-28B	2.8mm	0.25mm	22mm	1箱(5コ入)	4 902470 146843

〈フェザー微細手術用替刃メスハンドル〉 製造販売届出番号 21B2X10001062004 / 一般医療機器

品名	品番	材質	全長	入数	JANコードナンバー
専用ハンドル (フェザー微細手術用替刃メスハンドル)	NF-150S	チタン合金製	150mm	1本(ケース入)	4 902470 067087

※上記ハンドル以外にも、様々なタイプをご用意しています。

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社  
メディカル部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号  
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8040

ホームページ <http://www.feather.co.jp/>



9001:メディカル以外  
13485:メディカル