




フェザー[®] 微細手術用替刃メス


微細手術用替刃メス

微細手術用替刃メスハンドル


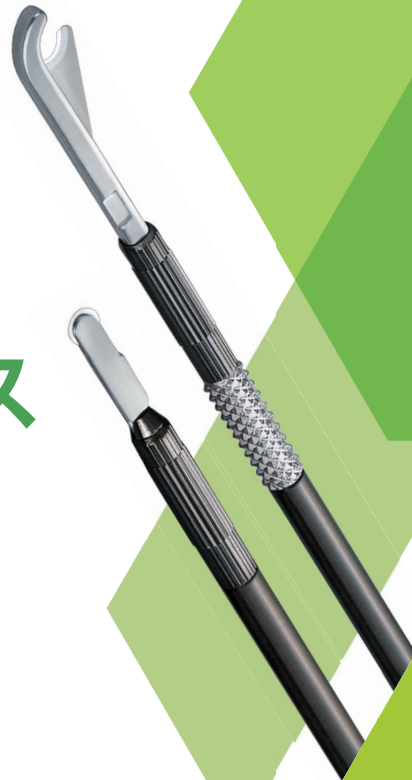


微細手術用替刃メス K-5530

微細手術用替刃メスK-5530は、関節鏡下手根管手術においてスムーズに靭帯を切開するために開発されたフック状のメスです。コンパクトな形状は、低侵襲手術に有用です。

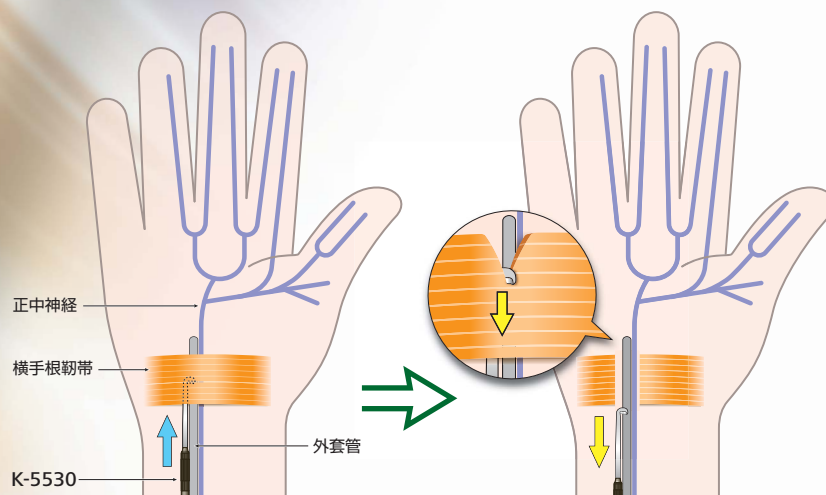

刃部を靭帯の末梢部に当て、
中枢側に引き靭帯を切開します。

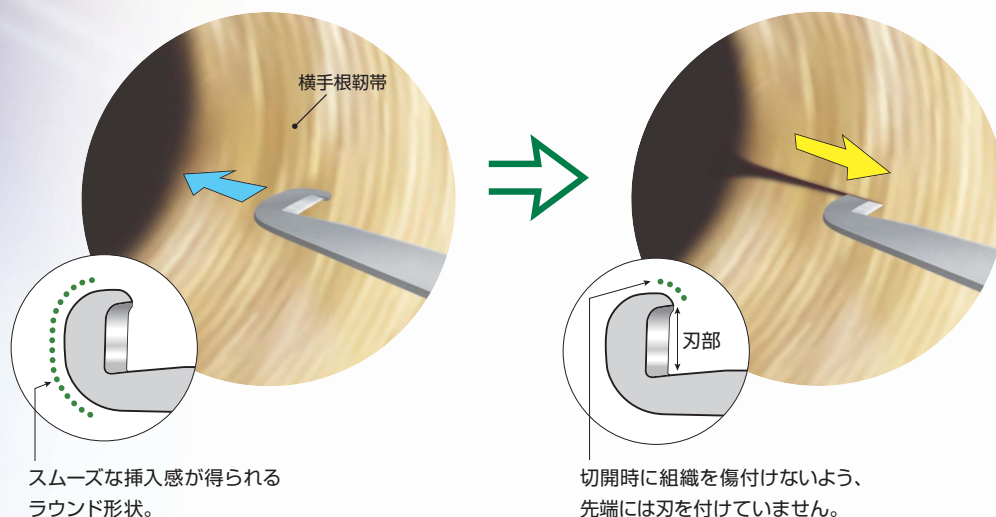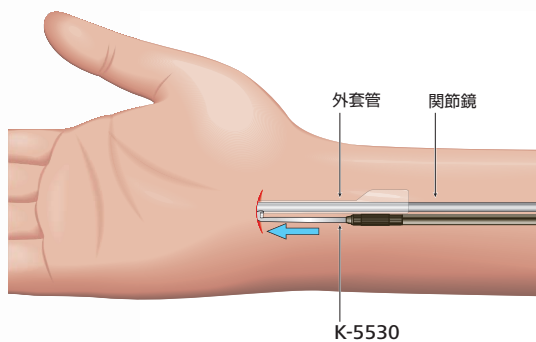

※イラストはイメージ図です。

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

微細手術用替刃メス

〈フェザー微細手術用替刃メス〉 製造販売認証番号: 219AABZX00133000 / 管理医療機器

微細手術用替刃メスは、替刃とハンドルがシステム化された製品です。刃物に適したステンレス鋼に精密刃付けされた鋭利な刃先と独創性を持ったオリジナルな形状は、従来のメスにない使いやすさを実現させました。

原寸大	拡大図	原寸大	拡大図
K-5100	刃厚 0.25mm ガイド 刃部	K-5110	刃厚 0.25mm ガイド 刃部
K-5200	両面ガード 刃厚 0.25mm 直径 2.6mm 刃部 2.0mm 0.3mm	K-5210	片面ガード 刃厚 0.25mm 直径 2.6mm 刃部 2.0mm 0.3mm
K-5300	刃厚 0.38mm 角度 30° 刃部 2.0mm 30°	K-5310	刃厚 0.38mm 角度 25° 刃部 1.0mm 25°
K-5400	刃厚 0.38mm 刃部 2.0mm	K-5410	刃厚 0.38mm 刃部 1.0mm
K-5411	刃厚 0.38mm 刃部 1.0mm	K-5420	刃厚 0.38mm 刃先: 先端R状 刃部 1.0mm
K-5421	刃厚 0.38mm 刃先: 先端R状 刃部 1.0mm	K-5500	刃厚 0.38mm 30° 刃部 2.0mm
K-5510	刃厚 0.38mm 30° 刃部 1.0mm	K-5520	刃厚 0.38mm 30° 刃部 1.0mm
K-5530	刃厚 0.38mm 4.0mm 2.0mm 刃部	K-5600	刃厚 0.38mm 刃部 1.5mm
K-5610	刃厚 0.38mm 刃先: 片面ノコギリ状 刃部 1.5mm		

替刃用プラスチックケース


替刃は、刃先を保護するプラスチックケースに格納されています。



●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。


微細手術用替刃メスの主な特長

K-5100 & K-5110

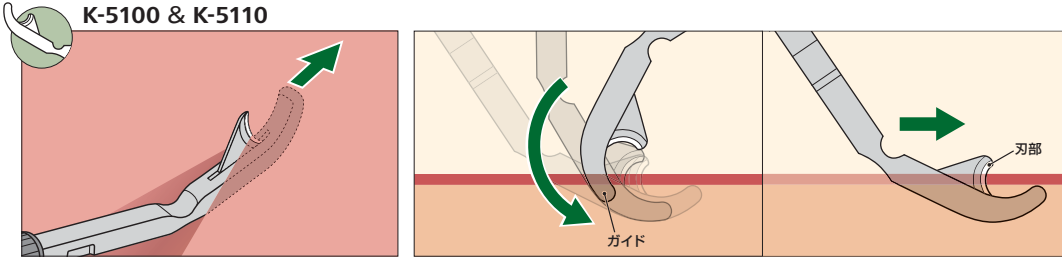


ガイド部と刃部で構成されたK-5100とK-5110は小さな切り口にガイド部を差し込み、押し切る様に使用します。

K-5200 & K-5210

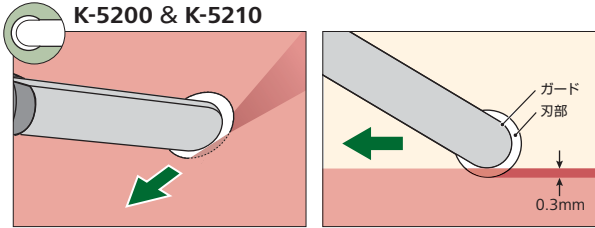

円状メスK-5200、K-5210は軽く押しあてながら切ることができます。刃が深く入りすぎないガード付きです。(強く押しあてると必要以上に刃が深く入りますのでご注意ください。)

K-5610

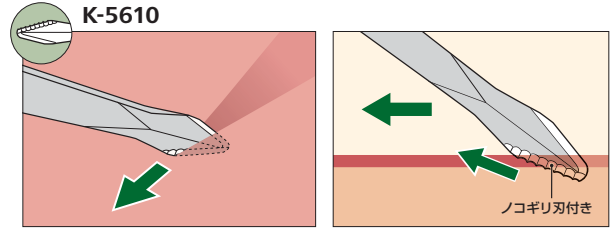


K-5610は矢じり型のメスの片側にノコギリ状の刃が付いています。

●このイラストの製品(K-5100 / K-5110 / K-5200 / K-5210 / K-5610)は当社のオリジナル形状です。


微細手術用替刃メスハンドル

〈フェザー微細手術用替刃メスハンドル〉 製造販売届出番号：21B2X10001062004 / 一般医療機器

ストレートタイプ 〈縮尺：70%〉

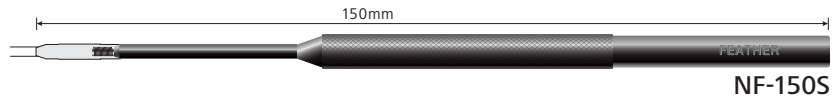

NF-150S

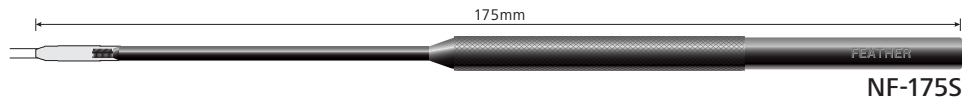


NF-175S


バヨネットタイプ 〈縮尺：70%〉



NF-100BA


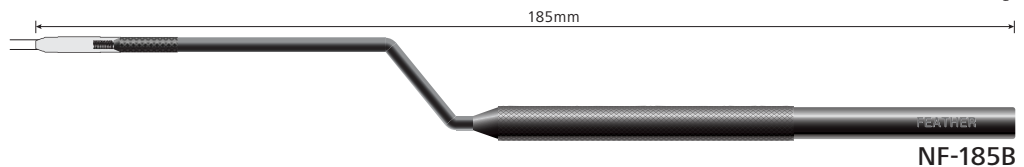


NF-185B

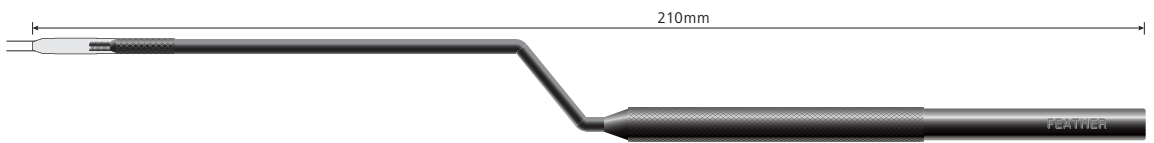


NF-210B


装着方法 (格納はこの逆)

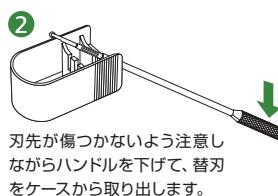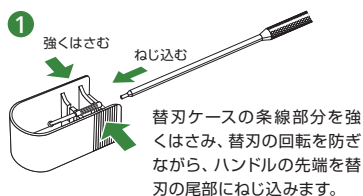



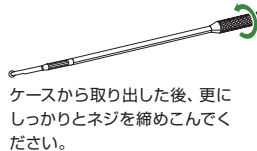



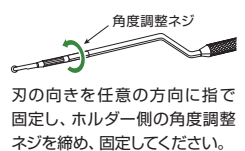









●NF-150S・NF-175Sの場合








●NF-185B・NF-210Bの場合



●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

	品番	仕様	入数	JANコードナンバー
微細手術用替刃メス	K-5100	ステンレス鋼 滅菌済	1箱(5コ入)	 4 902470 036090
	K-5110			 4 902470 036250
	K-5200			 4 902470 036113
	K-5210			 4 902470 036274
	K-5300			 4 902470 036137
	K-5310		 4 902470 036199	
	K-5400		 4 902470 036151	
	K-5410		 4 902470 036212	
	K-5411		 4 902470 046631	
	K-5420		 4 902470 036298	
	K-5421		 4 902470 046648	
	K-5500		 4 902470 036175	
	K-5510		 4 902470 036236	
	K-5520		 4 902470 036311	
	K-5530		 4 902470 149295	
	K-5600		 4 902470 036335	
	K-5610		 4 902470 036359	

	品番	仕様	入数	JANコードナンバー
微細手術用替刃メスハンドル	NF-150S	チタン合金製 無滅菌	1本(ケース入)	 4 902470 067087
	NF-175S		1本(ケース入)	 4 902470 067094
	NF-185B		1本(ケース入)	 4 902470 067100
	NF-210B		1本(ケース入)	 4 902470 067117
	NF-100BA		1本(ケース入)	 4 902470 067124



フェザー安全剃刀株式会社
——— メディカル商品部 ———

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8039
www.feather.co.jp/



ISO 13485 認証